

L&L SKIN

ELAX Masažer za Oči sa režimima grijanja i hlađenja

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

Molimo vas da sačuvate i pročitate uputstvo prije upotrebe

O PROIZVODU


Ultra-meka i lagana maska za oči savršeno se prilagođava vašim očima. Pruža toplotnu kompresiju kao i visoku vibrirajuću masažu, pomažući ubrzanju cirkulacije krvi. Savršena je za umorne mišiće oko očiju.

Kada se koristi sa ledenim gel pakovanjem, pomaže u smanjenju podbulosti i opušta oči. Sklopiv i prenosiv, bežični uređaj, omogućava uživanje u masaži bilo kada i bilo gdje.

SPECIFIKACIJA

Naziv proizvoda	Masažer za oči sa režimima grijanja i hlađenja
Model	ELAX
Radni napon	3.7 V ==
Radna snaga	6 W
Napon punjenja	SV==
Struja punjenja	1A
Temperatura zagrijavanja	45 +/- 5°C
Kapacitet baterije	600mAh
Veličina proizvoda	240 x 95 x 75 mm
Težina uređaja	77.5 g

NAZIV KOMPONENTI UREĐAJA

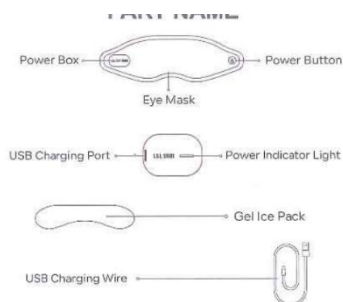

Kutija za napajanje
Dugme za napajanje
Maska za oči
USB port za punjenje
Indikator napajanja
Gel pakovanje za hlađenje
USB kabl za punjenje

KAKO KORISTITI

1. Postavite kutiju za napajanje magnetno pričvršćenu za masku za oči nakon pravilne instalacije, svjetlo za napajanje će se upaliti.




2. Stavite masku za oči na oči, a zatim dugo pritisnite dugme za napajanje sa desne strane maske na 1 sekundu. Maska će se uključiti i biće emitovana duga vibracija kao signal.



3. Nakon uključivanja, podrazumjevani režim masaže je toplina i vibracija. Kratkim pritiskom na dugme za napajanje možete prebacivati između režima masaže (toplina + vibracija) i režima toplote (samo toplina). Dvije kratke vibracije će signalizovati promjenu režima.



4. Ako vam je potreban hladni oblog, stavite gel pakovanje sa ledom u frižider na 10 minuta, zatim ga stavite unutar maske za oči i koristite bez uključivanja uređaja.

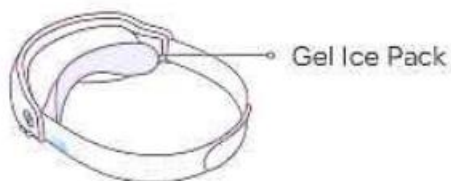


Napomena: automatsko gašenje će se desiti nakon 18 minuta u svakom režimu. Ako želite da zaustavite masažu, možete pritisnuti i držati dugme za uključivanje na 1 sekundu da isključite masku, biće duga vibracija kao signal.

UPUTSTVO ZA PUNJENJE

1. Kutija za napajanje je podjeljena u dva dijela. Svjetlo će se upaliti kada se kutija za napajanje magnetno pričvrsti za masku za oči, a različita svjetlosna stanja predstavljaju različite nivoe napajanja. Kada je nivo baterije prenizak, svjetlo će stalno treperiti.

Indikator napajanja

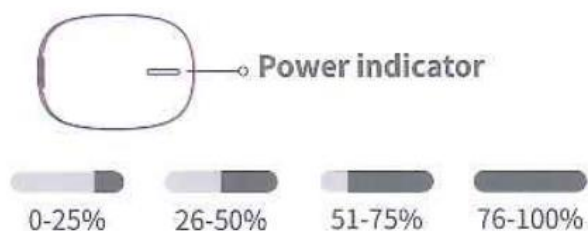

2. Prije punjenja, molimo vas da uklonite kutiju za napajanje sa maske za oči i napunite je pomoću USB kabla za punjenje. Vrijeme punjenja je oko 45 minuta. Tokom punjenja, plavo kontrolno svjetlo će treperiti, a svjetlo će prestati da treperi kada je uređaj potpuno napunjen. Nakon što se punjenje završi, molimo vas da pravovremeno isključite punjač.

Analiza kvara

Kvar	Mogući uzrok	Rješenje
Svjetlo indikatora napajanja nije upaljeno	Loš kontakt između baterije i maske Nizak nivo baterije	Dobro povežite bateriju Napunite bateriju
Ne radi	Nizak nivo baterije Automatski se isključuje nakon 18 minuta korišćenja	Napunite bateriju Ponovo pokrenite uređaj
Ne može se napuniti	Loš kontakt između USB kabla za punjenje i kutije za napajanje Vaš adapter ne funkcioniše dobro	Dobro povežite kabl za punjenje Koristite drugi adapter

Upozorenja

Kako biste izbjegli bilo kakvu povredu, molimo vas da pratite uputstva za korišćenje u nastavku. Posavjetujte se sa svojim ljekarom prije upotrebe ako ste na medicinskom tretmanu ili ako imate bilo koje od sljedećih stanja:

1. Trudnice.
2. Osobe koje imaju tjelesnu temperaturu od 38°C ili višu.
3. Osobe koje su izgubile osjećaj za temperaturu kože.
4. Osobe koje su pretrpjele oštećenja od niske temperature.
5. Osobe sa abnormalnim tjelesnim osjećajem.

Osobe sa sljedećim stanjima ne smiju koristiti ovaj proizvod:

1. Osobe kojima je zabranjena fizička aktivnost po medicinskom savjetu.
2. Stanja kao što su: tromboza, teški aneurizmi, akutni venski aneurizmi, sve vrste dermatitisa, sve vrste kožnih infekcija. Zabranjeno je, jer to može lako uzrokovati pogoršanje stanja.
3. Osobe koje ne mogu da izraze svoju volju ili ne mogu da koriste proizvodom same.
4. Djeca mlađa od 14 godina ne smiju koristiti ovaj proizvod.
5. Ako osjetite vrtoglavicu, povraćanje, pulsiranje ili druge fizičke reakcije, odmah prestanite sa upotrebom.

UPOZORENJA

1. Ne koristite proizvod u blizini kamina, električnih grljica i drugih uređaja za grljanje.
2. Ne koristite proizvod u vlažnoj sredini.
3. Ne koristite proizvod u kadi, lavabou, bazenu ili pod tušem.

4. Ne postavljajte teške predmete na proizvod nakon upotrebe kako biste spriječili oštećenje proizvoda.
5. Ne rastavljajte uređaj.
6. Izbjegavajte jaku sunčevu svetlost i eroziju korozivnih gasova i tečnosti.
7. Držite proizvod van dosega djece.
8. Maska za oči NIJE periva. Molimo vas da koristite čistu vlažnu krpu za brisanje površine maske.
9. Ne dozvolite da voda uđe u unutrašnjost proizvoda.
10. Ako se proizvod ne koristi duže vrijeme, očistite ga i stavite u torbu za skladištenje.