


L&L SKIN

MIO 2

Važna obavještenja


1. Molimo da uređaj napunite do punog kapaciteta prije prve upotrebe.
2. Ponovo napuniti uređaj ako nije korišćen duže vreme (oko 3 mjeseca).

Prednja strana

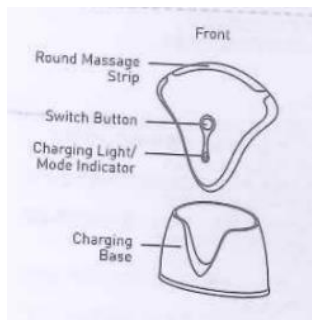

- Okrugla masažna traka
- Dugme za uključivanje/isključivanje
- Kontrolna lampica za punjenje/režim rada
- Baza za punjenje

Stražnja strana

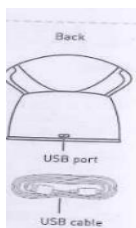

- USB port
- USB kabl

Punjenje uređaja prije upotrebe:

Potrebno je 3 sata da se uređaj potpuno napuni.

Kada je potpuno napunjen, uređaj možete koristiti 10 sati u plavom režimu ili 30 minuta u crvenom režimu.

Crveno trepereće svjetlo znači da je baterija prazna – stavite uređaj na bazu za punjenje.

Kako koristiti MIO2 Masažer:

Za najbolje rezultate, pomjerajte masažer u smjeru linije vaših mišića lica (kao što je prikazano na slici).



Površina broj 1 uređaja (kao što je prikazano na slici) je namjenjena za Gua Sha masažu. Gua Sha je veoma popularna u Kini i Japanu – pomaže u poboljšanju cirkulacije krvi i oslobađanju od nelagodnosti. Možete je koristiti na bilo kojem dijelu tijela.

Površina broj 2 je pogodna za mišiće oko obraza, čela i vrata.

Površina broj 3 je namjenjena za mišiće oko očiju, brade i usana.

1. Neka koža prije upotrebe uređaja bude čista i šminka uklonjena.
2. Nanesite odgovarajuću kremu, losion ili serum prema tipu vaše kože.
3. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na 1 sekund kako biste uključili masažer.
4. Kratko pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje kako biste prešli između režima zagrijavanja i umirujućeg režima za postizanje željenog efekta.

Umirujući režim (indikator svjetli plavo) hladi i umiruje vašu kožu uz nisku vibraciju – 142 Hertz-a.

Zagrijani režim (indikator svjetli crveno) pomaže u obnavljanju vaše kože uz višu vibraciju – 200 Hertz-a i toplotu od 45°C / 113°F.



5. Oblici uređaja omogućavaju mikrostruje i imaju glatke krivine, što omogućava lakšu primjenu na bilo kojem dijelu vašeg lica i tijela. Slobodno koristite bilo koju od tri površine uređaja, birajući onu koja vam bolje odgovara.
6. Nakon upotrebe, isključite uređaj pritiskom na dugme na 1 sekund, obrišite ga papirnim ubrusom ili ga operite i ostavite da se osuši na dobro provjetrenom mjestu.

Često postavljana pitanja

Koliko dugo treba da koristim uređaj svaki dan da bi se vidjeli rezultati?

Preporučuje se korišćenje uređaja 5-10 minuta svakog dana, nakon jutarnjeg i večernjeg čišćenja lica i tijela. Najbolje rezultate ćete vidjeti nakon 60 dana svakodnevne upotrebe.

Da li mogu nanjeti kremu ili serum na kožu prije upotrebe uređaja?

Da, preporučuje se korišćenje kozmetičkog proizvoda koji odgovara vašem tipu kože. Takođe, preporučuje se upotreba masažera nakon korišćenja hidratantnih, kolagenih ili vitamin maski – uređaj pomaže da nutrijenti prodru dublje u kožu.

Mogu li koristiti uređaj svaki dan?

Da, intenzitet vibracije i podešavanje temperature ovog uređaja su inteligentno dizajnirani od strane profesionalnog tima. Preporučuje se korišćenje uređaja više puta dnevno.

Uređaj je iznenada prestao da radi ili se ne uključuje. Šta treba da uradim?

- ✓ Izjava o odricanju odgovornosti Provjerite da li je uređaj ispravno napunjen. Uvijek ga napunite prije upotrebe ako nije korišćen duže vrijeme.
- ✓ Provjerite da li je baza za punjenje povezana sa USB kablom i da li je kabl priključen na izvor struje.

- ✓ Treperenje crvenog svjetla označava da je baterija prazna – stavite uređaj na bazu za punjenje.
- ✓ Pokušajte ponovo da isključite i uključite uređaj pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje na 1 sekundu.

Ovaj uređaj nije medicinski uređaj i ne treba ga koristiti za liječenje specifičnih bolesti. Izbjegavajte korišćenje uređaja u slučaju bilo kakvih kožnih patologija ili bolesti, oštećenja kože, rana ili ogrebotina. Ako osjećate bilo kakvu nelagodnost prilikom korišćenja masažera, odmah prestanite da ga koristite. Nemojte koristiti uređaj dok se puni.