


L&L SKIN

MIKO

Uputstvo za upotrebu

Otkrijte blistavost sa MIKO uređajem, koji sadrži EP, grijanje, kao i terapiju crvenim, plavim, ljubičastim i žutim svjetlom, sve upotpunjeno nježnim vibracijama. Ovaj inovativni uređaj pruža luksuzno i nebesko iskustvo u jednom. Napredna tehnologija će poboljšati blistavost vašeg tena dok istovremeno povećava stopu apsorpcije seruma i hidratantnih preparata. Iskusite transformativne efekte MIKO uređaja i podignite svoju rutinu samonjege na viši nivo.

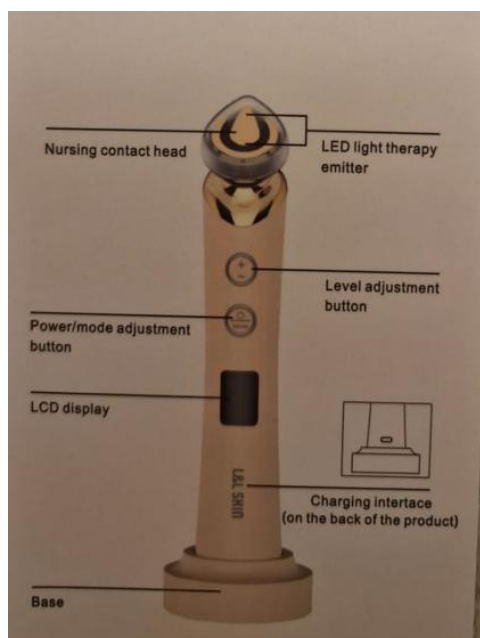

Glava za njegu (*Nursing contact head*)

Emitter LED svjetlosne terapije (*LED light therapy emitter*)

Dugme za podešavanje nivoa (*Level adjustment button*)

Dugme za uključivanje/podešavanje režima (*Power/mode adjustment button*)

LCD ekran (*LCD display*)

Priključak za punjenje (na zadnjem dijelu proizvoda) (*Charging interface – on the back of the product*)

Baza (*Base*)

REŽIM PROIZVODA:



Sjaj (Glow) EP+Crveno LED svjetlo

Poboljšava blistavost kože i proizvodnju kolagena pomoću EP struja i crvenog svjetla za mladalački sjaj



Oblikovanje (Sculpt) EP+Plavo LED svjetlo

Definiše konture lica i podmlađuje kožu zatezanjem i smanjenjem tamnih mrlja .



Obnova (Restore) grijanje+Ljubičasto LED svjetlo

Poboljšava cirkulaciju krvi, suzbija upale i povećava elastičnost kože za besprijekoran ten



Masaža (Massage) Vibracija+Žuto LED svjetlo

Opusta i podmlađuje kožu, smanjuje umor, pruža oksidaciju, usporavajući starenje

Kako se koristi:



Navodnjavanje (Watering)

Postavite glavu uređaja na kožu i kružnim pokretima je pomjerajte, stvarajući efekat podsticaja.



Podsticanje (Boosting)

Pritisnite i klizite glavom uređaja po koži kao da klizite, stvarajući efekat podsticaja



Fokus (Focus)

Postavite glavu uređaja na kožu i pritisnite na jednom mjestu 1–2 sekunde prije nego što pređete na sljedeće mjesto

Preporuke za čišćenje (Cleaning suggestions):

- Očistite odmah nakon svake upotrebe da biste izbjegli nakupljanje prljavštine i bakterija
- Izbjegavajte potapanje. Ne uranjajte uređaj za ljepotu u vodu niti ga ostavljajte u vlažnom okruženju.