


Uputstvo za upotrebu L&L SKIN HONO

Važan podsjetnik

1. Molimo napunite uređaj do kraja prije upotrebe.
2. Molimo ponovo napunite uređaj ako se ne koristi duži vremenski period (oko 3 mjeseca).

Struktura proizvoda

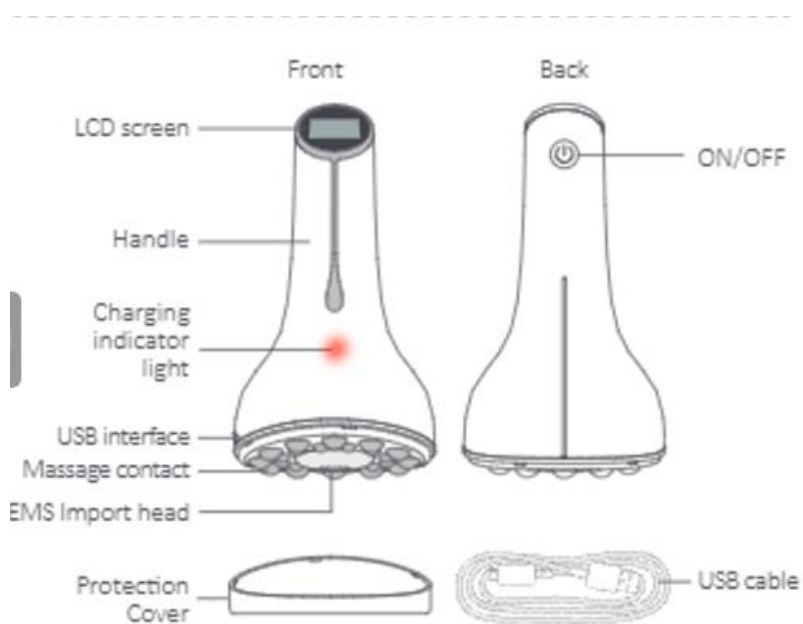

Prednja strana Front

LCD ekran *LCD screen*

Ručka *Handle*

Indikatorsko svjetlo za punjenje *Charging indicator light*

USB interfejs *USB interface*

Kontakt za masažu *Massage contact*

EMS ulazna glava *EMS Import Head*

Zadnja strana Back

Dugme ON/OFF

Zaštitni poklopac *Protection cover*

USB kabl *USB cable*

Instrukcija za 4 režima rada

Prva brzina

Mod ublažavanja (crveno, vibrirajuće svjetlo)

Druga brzina

Mod podizanja (povećanje vibracije: 2 puta kratka vibracija + 1 put duga vibracija) + trepćuće crveno svjetlo + približno 55°C temperatura zagrijavanja)

Treća brzina

EMS (slaba EMS struja + trepćuće crveno svjetlo)

Četvrta brzina

EMS (jaka EMS struja + trepćuće crveno svjetlo + približno 55°C temperatura zagrijavanja)

Karakteristike proizvoda

1. EMS može da prodre u epidermalne ćelije da bi dostigao dermis sloj kože, da ubrza proizvodnju kolagena, stimulise mišiće za masažu, obnavlja elastičnost mišića i zateže linije kako bi učinio linije vidljivijim.
2. Ubrzava krvotok sitnih krvnih sudova, tako da sastojci za njegu kože mogu biti efikasno isporučeni u mišićno tkivo i dermis.
3. Može da pomogne u obnavljanju elastičnih vlakana kože i tkiva kolagenskog sloja, čime se opuštaju i smanjuju bore.
4. Komponente masažne glave se sastoje od 24 mekane silikonske kuglice koje su u napravljene od silikona najvišeg kvaliteta sa visokom aktivnošću. U sredini je montirana glava koja je u skladu sa međunarodnim standardima. Bezbedna je, doprinosi zdravlju i fizički ne izaziva nikakvu iritaciju kože. Takođe je pogodna za kožu sklonu alergijama u svakodnevnoj upotrebi.
5. Četiri funkcije, kao masaža, lifting, EMS, zatezanje u jednom.
6. Engleski LCD ekran za prikaz, upotreba koraka je veoma jasna.
7. Sa funkcijom mjerenja vremena, svaki režim je vremenski ograničen na 2 minuta.
8. Ergonomski dizajn čini da se osjećate dobro kada koristite uređaj.
9. USB punjenje, bezbedno je i u skladu sa zaštitom životne sredine.

EMS masaža crvenim svjetlom i vibracijama

Aktivira timus, jača vezivno tkivo grudi i obnavlja elastičnost grudi.

Tradicionalna ručna masaža

Masaža nije ravnomjerna, ne može da pročisti mliječne kanale i ojačati grudi.



Kako koristiti na tijelu

1. Nakon kupanja, osušite kožu.
2. Nanesite eterična ulja ili losion na kožu.
3. Skinite zaštitni poklopac i dugo pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje 2 sekunde da uključite proizvod, i odaberite potreban režim.
4. Masažna glava klizi duž kože u pravoj liniji ili u kružnom pokretu, polako masirajte dok koža ne upije proizvod.
5. Nakon upotrebe, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 2 sekunde da isključite proizvod.



Kako koristiti za grudi

1. Očistite kožu grudi i osušite je.
2. Nanesite esencijalno ulje \ masažnu kremu.
3. Skinite poklopac proizvoda, dugo pritisnite ON/OFF dugme 2 sekunde da pokrenete uređaj i odaberete odgovarajući stepen.
4. Nježno masirajte grudi od kruga ka bradavici duž pravca mliječnih kanala 30–50 puta.
5. Nježno masirajte u malom krugu na različitim dijelovima grudi.
6. Koristite dlan da podignete grudi, a masažnu glavu da ih potisnete odozdo nagore.
7. Ponavljajte masažu u velikom krugu spolja ka unutra, dok koža ne upije esencijalno ulje \ masažnu kremu. Kada osjetite malo toplote, efekat je najbolji.
8. Nakon upotrebe, dugo pritisnite ON/OFF dugme 2 sekunde, proizvod će se isključiti.



Čišćenje proizvoda

1. Dugo pritisnite ON/OFF dugme 2 sekunde da isključite proizvod.
2. Operite proizvod mekom čistom krpom, ne koristite deterdžente.
3. Zatvorite poklopac i stavite proizvod na suvo i provjetreno mjesto.

Upozorenja

1. Molimo pročitajte priručnik za proizvod prije upotrebe i čuvajte ga za buduću upotrebu.
2. Koristite USB kabl za punjenje. Punjenje od niske baterije do potpunog punjenja traje 3,5 sata. 3,5 sati neprekidne upotrebe nakon punjenja.
3. Treperenje crveno svjetlo označava status punjenja. Kada crveno svjetlo prestane treperiti, to znači da je baterija potpuno napunjena.
4. Proizvod ima funkciju grijanja, prosječna temperatura je 55° C. Odstupanja u subjektivnom osjećaju temperature su normalna.
5. Proizvod se može koristiti i na drugim dijelovima tijela, kao što su ruke, noge, struk, kukovi i zadnjica.
6. Ako osjetite bilo kakvu neugodnost ili promjene na koži, odmah prestanite da koristite proizvod.
7. Proizvod nije vodootporan, molimo vas da ga ne stavljate u vodu.
8. Stavite proizvod na suvo i provjetreno mjesto, izbjegavajte direktnu sunčevu svjetlost i pobrinite se da nema korozivnih hemikalija u blizini.
9. Tkanina za čišćenje, napravljena od visokokvalitetnog flis materijala, može se prati više puta.
10. Nakon dugotrajnog nekorisćenja, proizvodu je potrebno 15 minuta da se ponovo aktivira u stanje punjenja, a indikator svjetlo treperi crveno, kao što je prikazano na slici.



Na početku punjenja Proizvodu je potrebno 15 minuta da se aktivira u stanje punjenja

11. Topla preporuka: Molimo vas da prvo koristite umjerene proizvode za njegu kože, a zatim ovaj uređaj. Imajte na umu da je pretjerana upotreba proizvoda za njegu kože teško apsorbirati. Takođe, preostali proizvodi za njegu kože mogu da prodru u ovaj uređaj i oštete ga. Molimo vas da očistite ovaj uređaj krpom za čišćenje nakon upotrebe.
12. Držite van domašaja djece, da biste izbjegli bilo kakvu opasnost.

Pitanja i odgovori

Zašto EMS režim ima osjećaj peckanja?

EMS je mikrostruja koja stimulira mišiće da se masiraju kroz mikrostrujni impuls, a elektroda može da dostigne dermis sloj. Preporučuje se da prvi put koristite uređaj iz treće brzine koja ima manju jačinu struje, a zatim da koristite četvrti stepen nakon što se naviknete.

Proizvod se ne zagrijava?

1. Provjerite da li ima struje ili ne.
2. Provjerite da li se uređaj uključuje kako treba.
3. Restartujte urešaj.
4. Molimo vas da kontaktirate distributera brenda.

Proizvod iznenada nema vibracije, ne radi, koji je razlog?

1. Povećajte upotrebu esencijalnog ulja \ masažne kreme.
2. Provjerite da li ima struje ili ne.
3. Provjerite da li se uređaj uključuje kako treba.
4. Restartujte uređaj.
5. Molimo vas da kontaktirate distributera brenda.

Mogu li koristiti ovaj instrument bez proizvoda za njegu kože?

Da, može se koristiti, ali je najbolje koristiti ga sa proizvodima za njegu kože. Upotreba proizvoda za njegu kože može poboljšati efikasnost jer instrument može da pomogne koži da ih upije.

Mogu li koristiti uređaj svaki dan?

Da, režim podešavanja i podešavanje intenziteta ovog uređaja inteligentno su osmišljeni od strane profesionalnog tima, stoga insistiranje na svakodnevnoj upotrebi će održati vaše tijelo u savršenoj liniji.

Koliki vremenski period se preporučuje za svakodnevnu upotrebu?

Preporučuje se da se koristi poslije kupanja i sušenja tijela, u skladu sa L&L Skin preporukama 15–20 minuta.

Ako sam alergičan, mogu li koristiti?

Glava za masažu uređaja posebno koristi nerđajući čelik koji je u skladu sa međunarodnim standardima, silicon najvišeg kvaliteta visoke aktivnosti, dokazano je da je bezbjedan, zdrav i da ne izaziva nikakvu iritaciju na tijelu osoba sa alergijskom kožom, molimo vas da budete sigurni da ga koristite svakodnevno.